



Najbolja HOYA progresivna sočiva nadaleko. I blizu

- Naša najpersonalizovanija progresivna sočiva
- Jednostavno i ugodno fokusiranje
- Savršena percepcija dubine
- Prirodno vizualno iskustvo, stabilnost u svim vidnim poljima
- Značajno unapređena intermedijlna zona i blizina

HOYA

Hoyalux iD MySelf

PROGRESIVNA FREEFORM SOČIVA

INIDIVIDUALIZOVANA PREMIJUM +

16mm

15 mm

14 mm

13 mm

12 mm

11 mm

iD MYSELF

Premijum progresivna sočiva sa najvišim nivoom personalizacije.

- Jednostavno i komforno prebacivanje sa blizine na daljinu
- Perfektna pecepcija i stabilnost vidnih polja
- Nenadmašne binokularne performanse sa izuzetno jasnim vidom, najprirodnije vizualno iskustvo potpuno podržano kooperacijom oba oka
- Potpomaže balans izmedju dinamičnog i digitalnog načina života
- Značajno unapređena intermedijalna zona i zona blizine zahvaljujući novom proračunu, bez kompromisa u zoni daljine



BINOCULAR HARMONIZATION TECHNOLOGY™

CENTRIRANJE

Dubina progresivnog kanala:	Od centra zenice do gornjeg ruba okulara:	od centra zenice do donjeg ruba okulara:
16 mm	10 mm	20 mm
15 mm		19 mm
14 mm		18 mm
13 mm		17 mm
12 mm		16 mm
11 mm		14 mm

PREPORUKA

- Koristite iDentifier kalkulaciju za odabir optimalnog, personalizovanog dizajna.
- Koristite VisuReal sistem za precizno centriranje sočiva.

FOTOOSETLJIVA DORADA

SENSITY 2	• naša najnaprednija fotoosetljiva opcija • izuzetno transparentna u zatvorenom • više od 2 puta brže vreme reakcije
SENSITY DARK	• naša najnaprednija fotoosetljiva opcija • izuzetno transparentna u zatvorenom • više od 2 puta brže vreme reakcije
SENSITY SHINE	• Izrazite Vaš stav sa Sensity Shine! • Jasan poput bojnih sočiva sa Light Mirror efektom • Dostupne kombinacije: - Sensity Tamno Braon+Copper Light Mirror - Sensity Tamno Sivo + Silver Light Mirror - Sensity Tamno Zelena + Blue Light Mirror
HOYA MIRROR	Hoya Mirror opcija je prikazana na strani 149 ovog kataloga. Mirror efekat i Light Mirror zavise od odabranih kombinacija. Da proverite ograničenja pogledajte stranu 151.

* Idealna temperatura 23°C - Fotohromatske performanse zavise od temperature, izloženosti UV zracima i materijalu sočiva.

GARANCIJA



Production guarantee:

G2: 3 godine garancije na HiVision LongLife UV control i Blue Control

G3: 60 dana navikavanja



G4: 1 godina garancije na PNx 1.53

RASPONI PROIZVODNJE

Eyvia 1.74	Eynea 1.67	Eyas 2.0 1.60	PNX 1.53	Plastic 1.50
Ø80: +3.00► - 6.00 cyl.≤4.00 Ø75: +6.00►-10.00 cyl.≤4.00 Ø75: +3.00► - 6.00 cyl.≤6.00 Ø70: +8.00►-13.00 cyl.≤6.00 Ø65: +10.00►-15.00 cyl.≤6.00 Adicija: 0.75 - 3.50 Prism: 5 cm/m-ig	Ø80: +3.00► - 6.00 cyl.≤4.00 Ø75: +6.00►-10.00 cyl.≤4.00 Ø75: +3.00► - 6.00 cyl.≤6.00 Ø70: +8.00►-13.00 cyl.≤6.00 Adicija: 0.75 - 3.50 Prism: 5 cm/m-ig	Ø80: +3.00► - 6.00 cyl.≤4.00 Ø75: +5.00► - 8.00 cyl.≤4.00 Ø75: +3.00► - 6.00 cyl.≤6.00 Ø70: +5.00► - 8.00 cyl.≤6.00 Ø70: - 8.25►-10.00 cyl.≤4.00 Ø65: +8.00►-11.00 cyl.≤6.00 Adicija: 0.75 - 3.50 Prism: 5 cm/m-ig	Ø75: +2.00► - 8.00 cyl.≤4.00 Ø70: +6.00► - 8.00 cyl.≤5.00 Ø65: +6.00► - 8.00 cyl.≤6.00 Adicija: 0.75 - 3.50 Prism: 3 cm/m-ig	Ø75: +1.50► - 8.00 cyl.≤4.00 Ø70: +3.50► - 8.00 cyl.≤5.00 Ø65: +6.00► - 8.00 cyl.≤6.00 Adicija: 0.75 - 3.50 Prism: 3 cm/m-ig

Gravure	Materijal - indeks				
	1.50	1.53	1.60	1.67	1.74
Hoyalux ID MySelf 11 mm	MY11	MY1X	MY13	MY15	MY17
Hoyalux ID MySelf 12 mm	MY21	MY2X	MY23	MY25	MY27
Hoyalux ID MyStelf 13 mm	MY31	MY3X	MY33	MY35	MY37
Hoyalux ID MyStelf 14 mm	MY41	MY4X	MY43	MY45	MY47
Hoyalux ID MySelf 15 mm	MY51	MY5X	MY53	MY55	MY57
Hoyalux ID MySelf 16 mm	MY61	MY6X	MY63	MY65	MY67

Vrednost adicije prema metodi refrakcije (npr. Add.2.25)	22F = Prednja adicija Add. 2.25
	22B = Zadnja adicija Add. 2.25
	22W= Foropter Add. 2.25

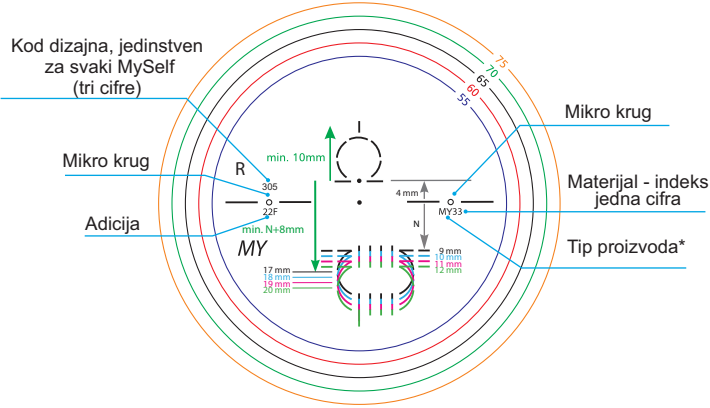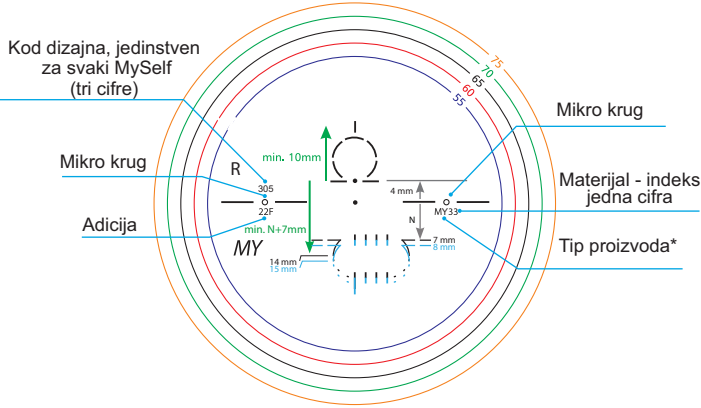

* MY oznaka dizajna, a sledeći broj pokazuje dubinu progresivnog kanala



INSTRUKCIJE ZA MONTAŽU


- Horizontalno - Izmerite pupilarnu distancu za desno i levo oko, koristeći sredinu okvira kao referentnu tačku.
- Vertikalno - tačka ugradnje postavljena je u sredini zenice, kada je telo u prirodnom položaju, a pogled na daljinu, poštujući razliku između desnog i levog oka.

Hoyalux iD MySelf

RASPONI PROIZVODNJE (OSNOVNO,
SENSITY FOTOSETLJIVA DORADA)

16/15/14/13mm

EYVIA 1.74
(samo osnovno)

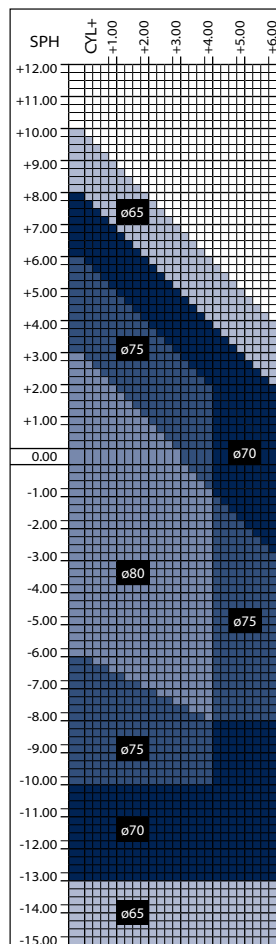


Rasponi proizvodnje:

ø80: +3.00► - 6.00 cyl.≤4.00
ø75: +6.00►-10.00 cyl.≤4.00
ø75: +3.00► - 6.00 cyl.≤6.00
ø70: +8.00►-13.00 cyl.≤6.00
ø65:+10.00►-15.00 cyl.≤6.00

Adicija: 0.75 - 3.50
Prizma max 5 cm/m

12/11mm

EYVIA 1.74
(samo osnovno)

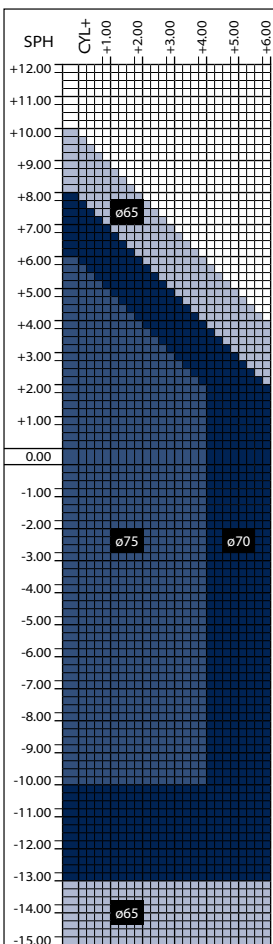


Rasponi proizvodnje:

ø75: +6.00►-10.00 cyl.≤4.00
ø70: +8.00►-13.00 cyl.≤6.00
ø65: +10.00►-15.00 cyl.≤6.00

Adicija: 0.75 - 3.50
Prizma max 5 cm/m

16/15/14/13mm

EYNOA 1.67

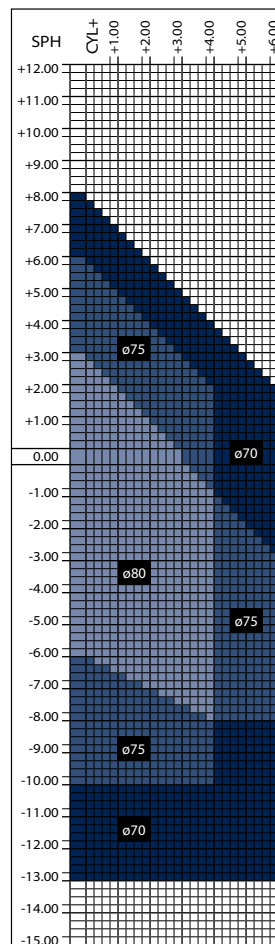


Rasponi proizvodnje:

ø80: +3.00► - 6.00 cyl.≤4.00
ø75: +6.00►-10.00 cyl.≤4.00
ø75: +3.00► - 6.00 cyl.≤6.00
ø70: +8.00►-13.00 cyl.≤6.00

Adicija: 0.75 - 3.50
Prizma max 5 cm/m

12/11mm

EYNOA 1.67

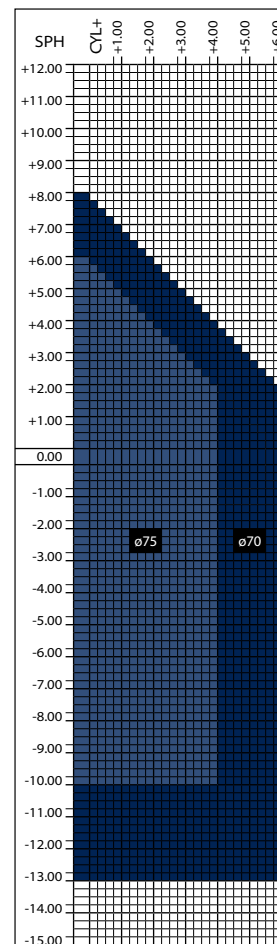


Rasponi proizvodnje:

ø75: +6.00►-10.00 cyl.≤4.00
ø70: +8.00►-13.00 cyl.≤6.00

Adicija: 0.75 - 3.50
Prizma max 5 cm/m

ADICIJA															
0.25	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00

16/15/14/13mm EYAS 2.0 1.60

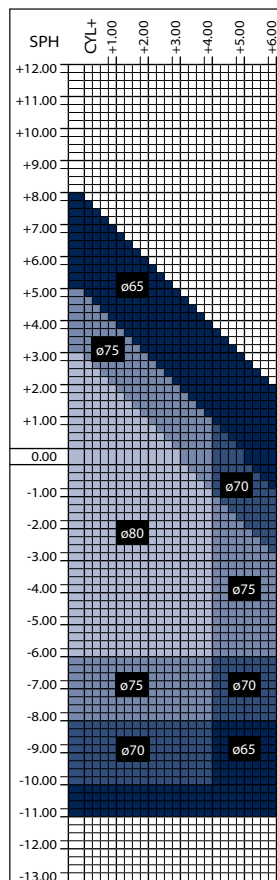


Rasponi proizvodnje:

ø80: +3.00► - 6.00 cyl.≤4.00
 ø75: +5.00► - 8.00 cyl.≤4.00
 ø75: +3.00► - 6.00 cyl.≤6.00
 ø70: +5.00► - 8.00 cyl.≤6.00
 ø70: - 8.25► -10.00 cyl.≤4.00
 ø65: +8.00► -11.00 cyl.≤6.00

Adicija: 0.75 - 3.50
 Prizma max 5 cm/m

12/11mm EYAS 2.0 1.60

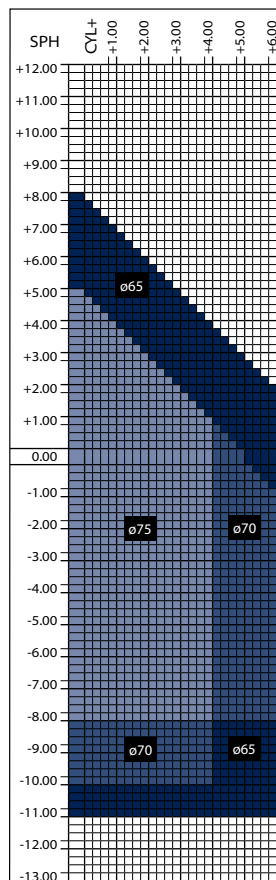


Rasponi proizvodnje:

ø75: +5.00► - 8.00 cyl.≤4.00
 ø70: +5.00► - 8.00 cyl.≤6.00
 ø70: - 8.25► -10.00 cyl.≤4.00
 ø65: +8.00► -11.00 cyl.≤6.00

Adicija: 0.75 - 3.50
 Prizma max 5 cm/m

16/15/14/13/12/11mm PNX.1.53

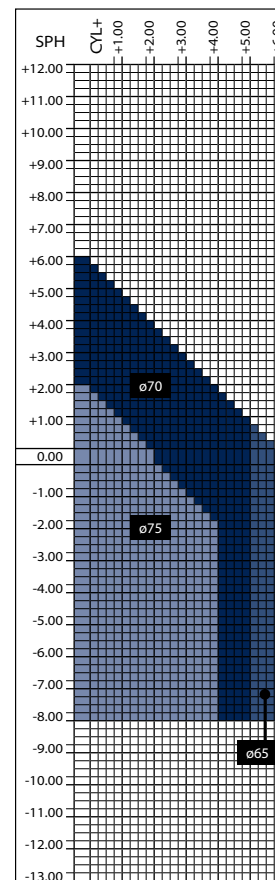


Rasponi proizvodnje:

ø75: +2.00► - 8.00 cyl.≤4.00
 ø70: +6.00► - 8.00 cyl.≤5.00
 ø65: +6.00► - 8.00 cyl.≤6.00

Adicija: 0.75 - 3.50
 Prizma max 5 cm/m

16/15/14/13/12/11mm 1.50

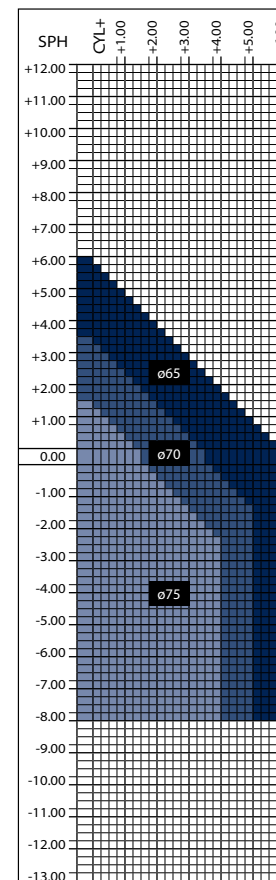

Rasponi proizvodnje:

ø75: +1.50► - 8.00 cyl.≤4.00
 ø70: +3.50► - 8.00 cyl.≤5.00
 ø65: +6.00► - 8.00 cyl.≤6.00

Adicija: 0.75 - 3.50
 Prizma max 5 cm/m